

ESECUZIONE DEL TAMPONE NASO FARINGEO PER SARS – COV 2

MATRICE DELLE REVISIONI					
REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDAZIONE	VERIFICATA	APPROVATA
00	24.04.2020	1a emissione	SC Medicina del Lavoro	SC Malattie Infettive SPPA	Direttore Sanitario
			Prof. Corrado Negro	Prof. R Luzzati Dr. Daniele Riva	Dr.ssa Adele Maggiore

INDICE

1. SCOPO	3
2. AMBITO DI APPLICAZIONE	3
3. ACRONIMI E DEFINIZIONI	3
4. RESPONSABILITÀ	3
5. MODALITÀ ESECUTIVE	3
6. GESTIONE DEI DOCUMENTI	3
6.1 DISTRIBUZIONE ED ACCESSIBILITÀ.....	3
6.2 CONSERVAZIONE, CONTROLLO E ARCHIVIAZIONE.....	3
7. RIFERIMENTI	3
7.1 RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
7.2 RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI.....	4
8. DOCUMENTI COLLEGATI.....	4
9. DOCUMENTI ALLEGATI.....	4

1. SCOPO

Illustrare le corrette modalità di esecuzione del tampone naso-faringeo per SARS-COV-2, al fine di ottimizzare la sensibilità del test.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le seguenti modalità operative si applicano a tutto il personale di ASUGI che deve effettuare il campionamento biologico per la ricerca del SARS-COV-2.

3. ACRONIMI E DEFINIZIONI

ASUGI: Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina

IO: Istruzione operativa

LAB: laboratorio

PZ: paziente

SARS-CoV-2: l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) ha intanto denominato il nuovo coronavirus "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" .

4. RESPONSABILITÀ

Gli operatori designati che effettuano il campionamento sono responsabili per le loro attività della corretta applicazione della seguente IO.

5. MODALITÀ ESECUTIVE

Per le modalità esecutive vedere l'allegato 1.

6. GESTIONE DEI DOCUMENTI

6.1 DISTRIBUZIONE ED ACCESSIBILITÀ

La presente procedura è pubblicata: tramite posta elettronica aziendale e la sua accessibilità sarà anche visionabile sul sito intranet aziendale.

6.2 CONSERVAZIONE, CONTROLLO E ARCHIVIAZIONE

La documentazione prodotta dalla seguente IO viene conservata ed archiviata dalle strutture interessate.

7. RIFERIMENTI

7.1 RIFERIMENTI NORMATIVI

Non applicabile.

7.2 RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Sorveglianza Epidemiologica e Virologica dell'Influenza - PROTOCOLLO OPERATIVO Stagione 2019-2020 – Istituto Superiore di Sanità - Allegato 5 - procedura per la raccolta dei campioni clinici)
- Rapporto ISS “COVID-19” N. 2/2020 Rev. del 28/03/2020

8. DOCUMENTI COLLEGATI

- Istruzione operativa “GESTIONE DEI CAMPIONAMENTI BIOLOGICI PER SARS-CoV-2 A DOMICILIO”

9. DOCUMENTI ALLEGATI

Allegato 1 – Modalità di esecuzione del tampone naso-faringeo per SARS-CoV2


Allegato 1 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL TAMPONE NASO-FARINGEO PER SARS-COV2

Si ricorda di usare le corrette procedure di lavoro sicuro (corretta sequenza di vestizione dei dispositivi di protezione individuale, come da procedure dedicate)

- Estrarre il bastoncino con tampone avendo cura di non contaminarlo
- **ESEGUIRE IN SEQUENZA IL TAMPONE FARINGEO E QUINDI QUELLO NASALE**

TAMPONE FARINGEO

1. Invitare il paziente a piegare la testa all'indietro e aprire bene la bocca (Se necessario, usare un abbassalingua sterile)
2. Inserire il tampone tra i pilastri tonsillari e dietro l'ugola.
3. Strofinare le zone tonsillari.
4. Evitare che il tampone si contaminino con la saliva, evitando il contatto del tampone con la lingua, le guance o le arcate dentarie.

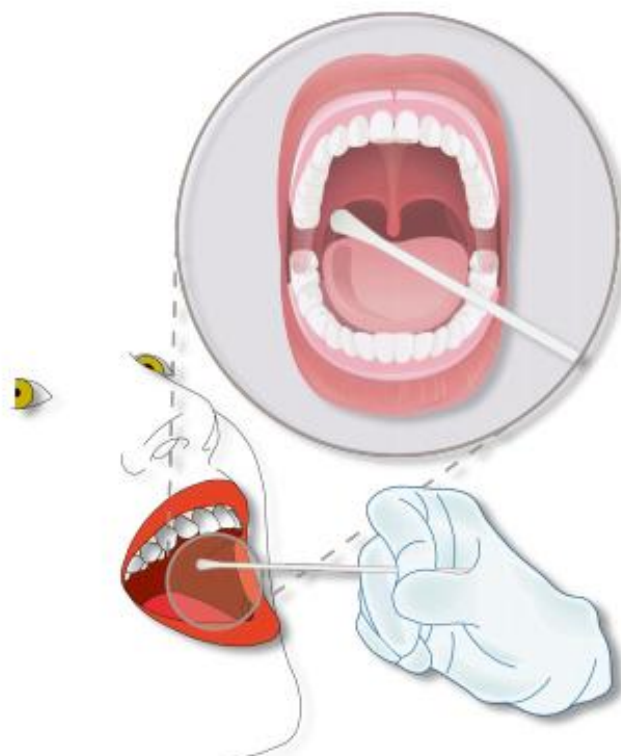

Estrarre il bastoncino con tampone avendo cura di non contaminarlo

ESEGUIRE CON IL MEDESIMO BASTONCINO IL TAMPONE NASOFARINGEO

1. Invitare il paziente ad assumere una posizione eretta con la testa leggermente inclinata all'indietro.
2. Inserire delicatamente il tampone nella narice e spingerlo lungo la cavità nasale in modo da raggiungere la parte posteriore della rinofaringe.
3. Ruotarlo delicatamente perché si ricopra abbondantemente con il secreto nasale
4. Ripetere la manovra nell'altra narice.



Una volta terminato il tampone il bastoncino va inserito nella provetta contenente il terreno di trasporto e spezzato e la provetta va chiusa con cura.

Si ricorda di usare le corrette procedure di lavoro sicuro (corretta sequenza di svestizione dei dispositivi di protezione individuale).

VIDEO PER LA CORRETTA ESECUZIONE DEL TAMPONE NASO-FARINGEO SONO DISPONIBILI AI SEGUENTI LINK:

[HTTPS://WWW.NEJM.ORG/DOI/FULL/10.1056/NEJMvcm2010260](https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMvcm2010260)

[HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=DVJNWEFMHJE](https://www.youtube.com/watch?v=DVJNWEFMHJE)